

帆羽

下颌运动轨迹跟踪记录仪



高性价比，高准确度




采用红外测量技术



无源头架，重量轻



无线脚踏控制

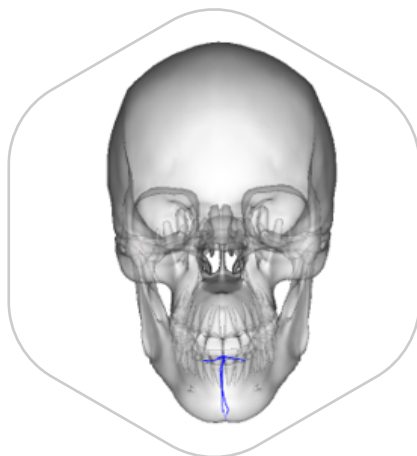


操作步骤

1 佩戴头架




2 捕获耳道点

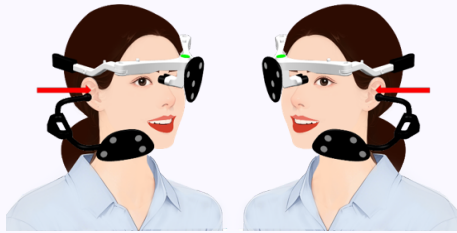


3 记录上颌平面




4 粘结下颌叉并记录起始位置

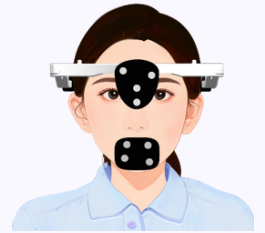

5 记录下颌运动

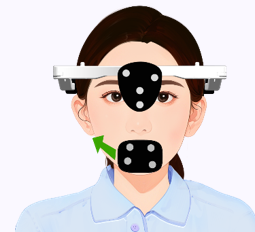

测量结果

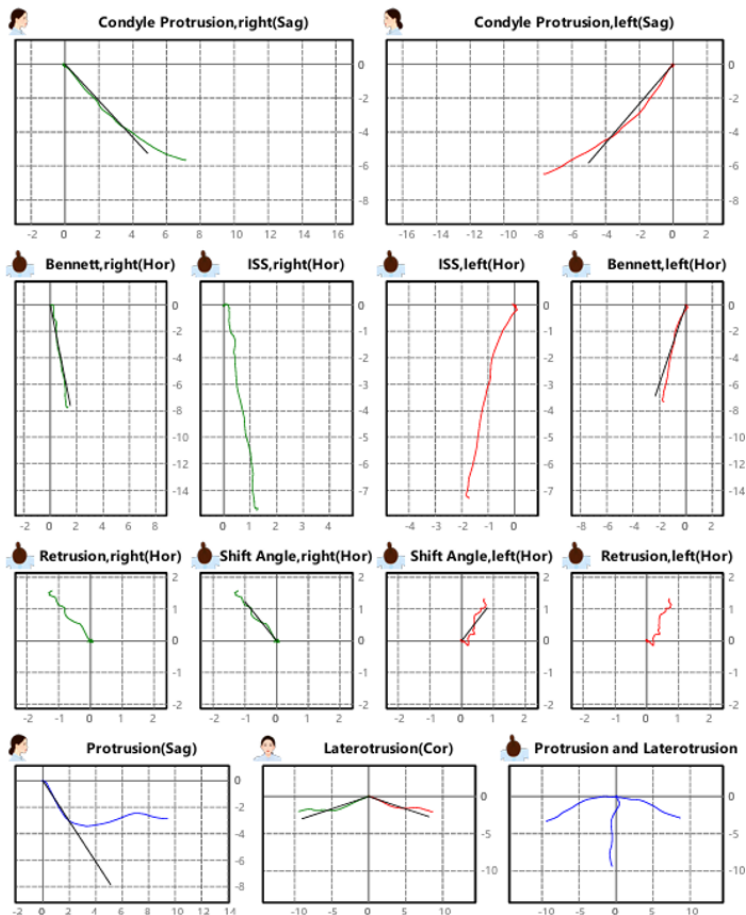


实体颌架转移参数




Sagittal Condyle Incl, °	L	49.79	
	R	46.97	
Bennett Angle, °	L	18.52	
	R	11.27	
ISS, mm	L	0.00	
	R	0.00	
Retrusion, mm	L	1.32	
	R	1.58	
Front Table Inclination, °	L	18.83	
	R	19.46	
	S	56.93	


数据可以保存成Jawmotion格式，并导入EXOCAD生成虚拟颌架

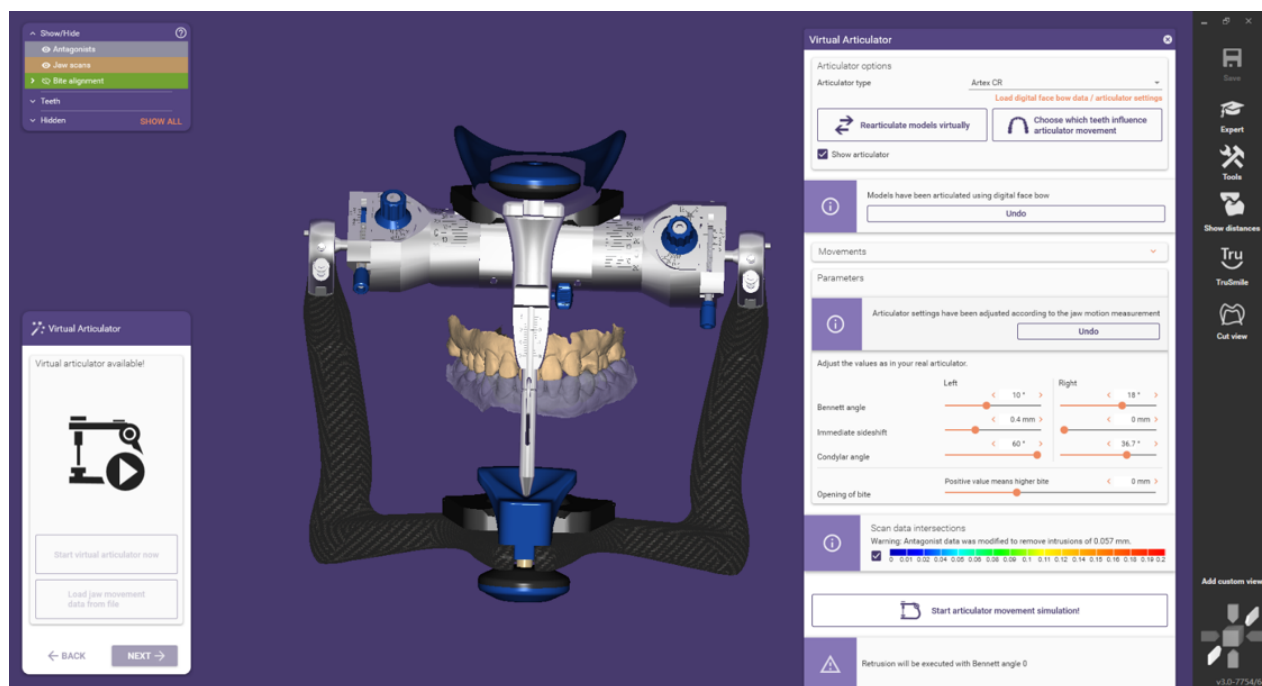

融合口扫、CBCT、面扫及下颌运动轨迹，创建虚拟患者，同时动态显示咬合接触情况

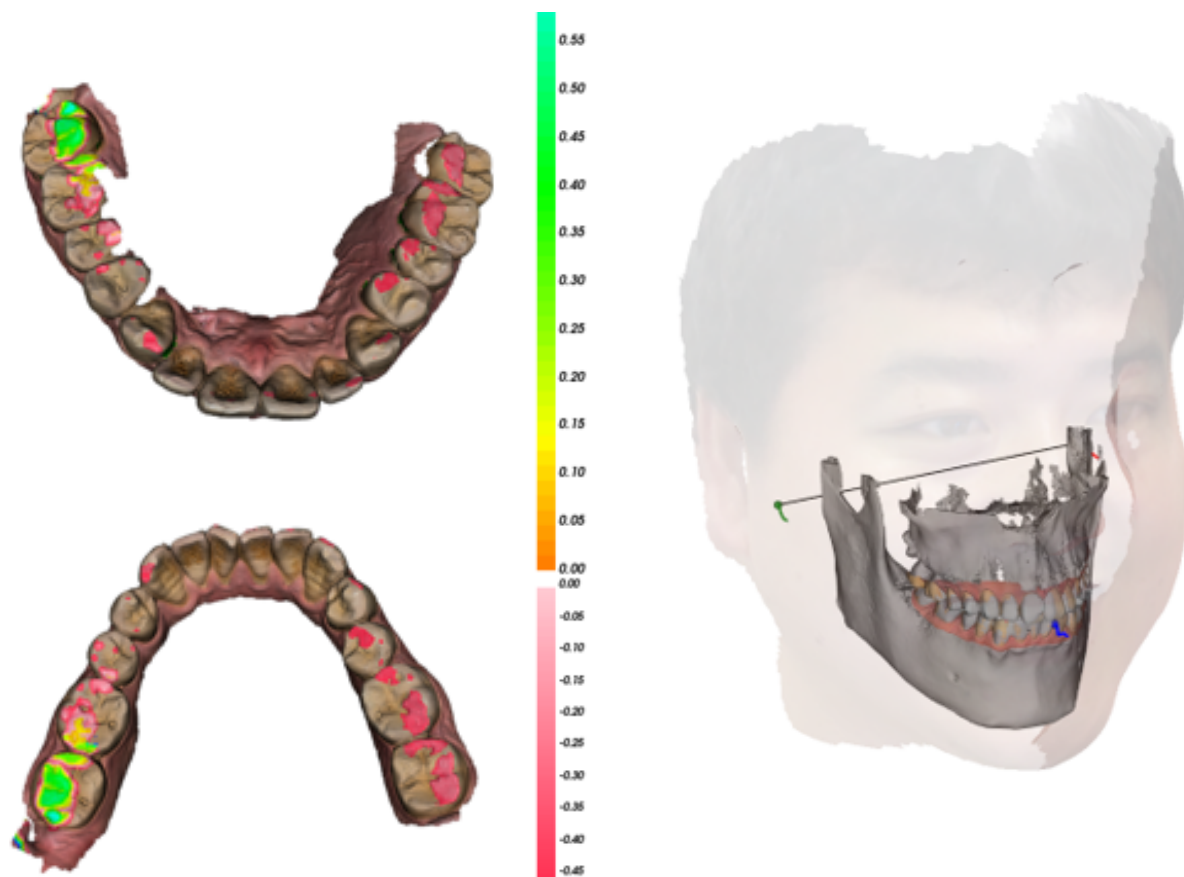

■ 所有附件

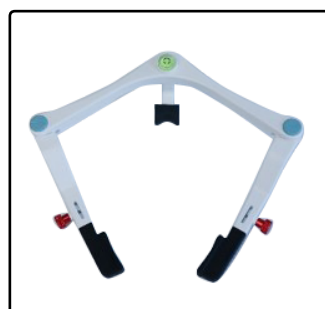

头架



头架跟踪标记



上颌叉及跟踪标记



下颌叉及跟踪标记



耳道点获取杆及跟踪标记



连接杆



脚踏开关

技术参数：

- 主机重量：900g
- 头架重量：200g
- 数据刷新频率：60Hz

计算机系统要求：

- 操作系统：window 10 以上
- cpu：intel i5以上
- 内存：8G
- 硬盘：500G以上
- 显卡：无特别要求

上海舍成医疗器械有限公司

地址：上海市浦东新区航头路158弄12幢2层203室

网址：www.scedent.com

